

Montageanleitung HP VELOTECHNIK Aufstehhilfe für Scorpion-Modelle mit Vorderradfederung



Aufstehhilfe montiert an einem Scorpion plus 20

Beschreibung

HP VELOTECHNIK Aufstehhilfen sind Handgriffe, die links, rechts oder paarweise auf dem Querrohr des Hauptrahmens montiert werden. Sie bieten festen Halt, um sich aus dem Sitz hochzuziehen oder sich beim Einsteigen abzustützen. Sie können nach dem Lösen eines Schnellspanners eingestellt oder abgenommen werden.

Die Montage der Aufstehhilfen kann von Endverbraucherinnen und Endverbrauchern vorgenommen werden.

Inhalt

- Aufstehhilfe mit Schnellspanner
 - Adapter
 - Gelenkbolzenschelle
 - Montageanleitung
 - Befestigungsmaterial
- (Ziehen Sie ggf. den Adapter aus der Aufstehhilfe um das Befestigungsmaterial zu entnehmen).

Montage

Positionieren Sie den Adapter so auf das Querrohr, dass die Aufnahme leicht nach außen zeigt.



Legen Sie die Gelenkbolzenschelle um das Querrohr.




Nutzen Sie zur Befestigung des Adapters zunächst die längere Zylinderkopfschraube (45 mm) um die Gelenkbolzenschelle vorzuformen. Danach tauschen Sie die Schraube gegen die kürzere Zylinderkopfschraube (40 mm), legen Sie dabei eine Unterlegscheibe unter den Schraubenkopf. Ziehen Sie die Schraube mit einem Drehmoment von 8–10 Nm fest.



Richten Sie die Aufstehhilfe aus und fixieren Sie sie in der gewünschten Position indem Sie den Schnellspanner schließen. Hinweise zu Schnellspannern finden Sie in der Originalbetriebsanleitung Ihres Dreirads.

Prüfen Sie, ob sich der Lenker nach der Montage der Aufstehhilfen vollständig bewegen lässt. Zwischen den Händen des Fahrers und der Aufstehhilfe müssen in jeder Lenkerstellung mindestens 2 cm Abstand bleiben.

Mounting Instruction HP VELOTECHNIK Standing-up Aids for Scorpion Models with Front Suspension

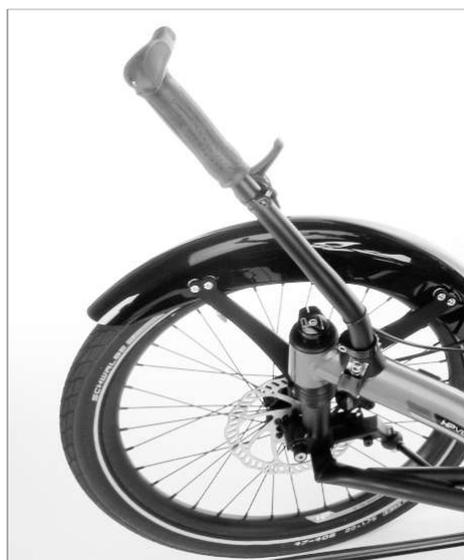

Standing-up aid mounted on a Scorpion plus 20

Description

HP VELOTECHNIK standing-up aids are handles that can be mounted left, right or in pairs above the main frame's cross tube. The standing-up aids provide a firm hold to pull yourself up from the seat or to support yourself when getting in. The standing-up aids can be adjusted or removed after loosening a quick release. Mounting can be performed by customers.

Content

- standing-up aid with quick release lever adapter
 - hose clamp
 - mounting instructions
 - mounting material
- (If necessary, pull the adapter out of the standing-up aid to remove the mounting material).

Mounting

Position the adapter onto the cross tube in such a way that the mounting tube points slightly outwards.



Place the hose clamp around the cross tube.



To fix the adapter, first use the longer cylinder head screw (45 mm) to preform the hose clamp. Then replace the screw with the shorter cylinder head screw (40mm), placing a washer under the screw head. Tighten the screw with a torque of 8–10 Nm.



Put the standing-up aid on the adapter, align it and fix the position by closing the quick release lever. Find further information on quick release levers in your trike's manual.

Check if the handlebars can be moved completely in both directions. The clearance between the rider's hands and the standing-up aid must be at least 2 cm in any position of the handlebars.